




# Distillateur d'eau

---

Distillateur d'eau

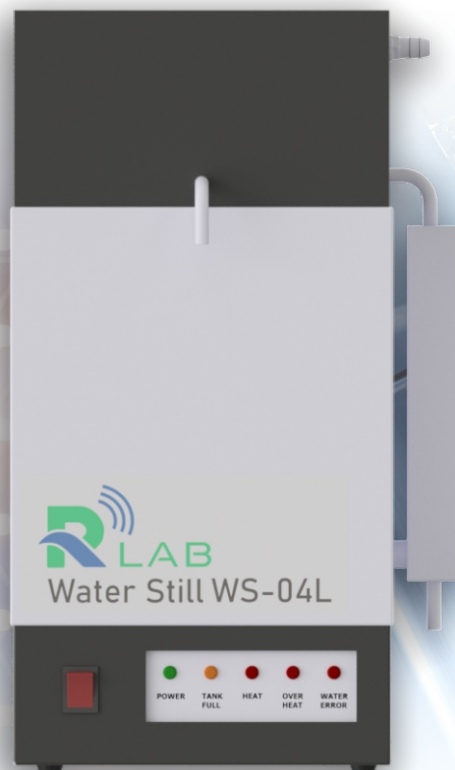

## DESCRIPTION


Distillateur d'eau est un équipement, utilisée pour fournir de l'eau distillée de très haut degré de pureté.

Il fonctionne sur un principe simple consistant à faire bouillir de l'eau en vapeur, en la condensant à travers un condenseur puis de le ramener à son état liquide sous une forme purifiée.

RLAB offre deux versions pour le Distillateur d'eau :

Version standard : équipé d'un système de sécurité standard à la détection d'un défaut tous le système s'arrête de fonctionner.

Version pro : équipé d'un système de auto diagnostique qui permet la supervision de l'état des résistances chauffantes et la présence de l'eau. En cas de défaut le système affiche un message d'erreur et il peut continuer à fonctionner par exemple si le système est équipé de trois résistances chauffantes et une en panne les deux autres restent en fonction et le système vous affiche le numéro de la résistance en panne.

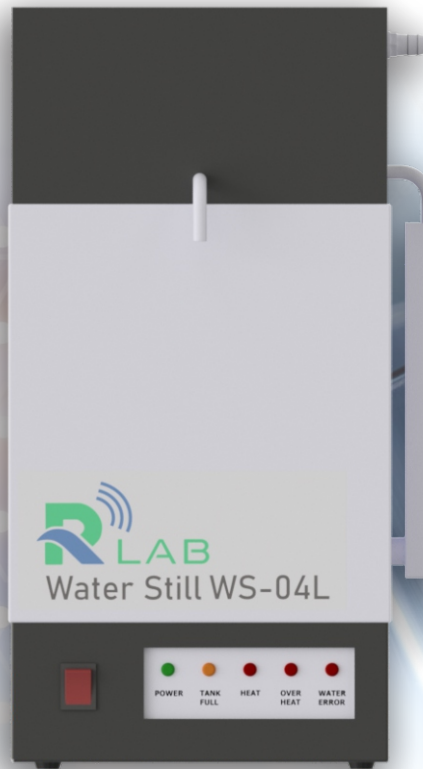

## Caractéristique technique

- Durable, fiable et à faible coût.
- Eau distillée de haute pureté - conductivité environ 2,5  $\mu\text{S}/\text{cm}$ .
- Capteur de niveau pour le branchement d'un réservoir externe.
- Capteur de niveau de réservoir externe.
- Sécurité d'arrêt thermostatique automatique.
- Resistance chauffant en INOX de haute qualité.
- Tous les matériaux en contact avec de l'eau sont en INOX 304L.
- Évaporateur et condenseur facilement accessibles pour le nettoyage.
- L'unité convient à la fois au montage sur table et au mur.

	Capacity	Consumption	Power	Power Requirement	Weight	Dimension(mm)
WS-02L	2L/H	25L/H	1700w	AC 220V	15.8kg	210x250x410
WS-04L	4L/H	40L/H	3000w	AC 220V	20.2kg	280x250x520
WS-08L	8L/H	70L/H	6000w	3Ph AC 380V	32.5kg	320*450*620
WS-12L	12L/H	193L/H	9000w	3Ph AC 380V	44.2kg	450*650*700

(WS-02L-S pour version standard, WS-02L-P pour version professionnelle)

## Garantie 2 ans



# Contact

---

Page Facebook : [facebook.com/rlabtn](https://facebook.com/rlabtn)

Site web: [www.rlab.tn](http://www.rlab.tn)

Bureau en tunisie:



Fixe:

+216 73 534 458

Mobile:

+216 93 413 441

Service technique :

[tech@rlab.tn](mailto:tech@rlab.tn)

service commercial:

[commercial@rlab.tn](mailto:commercial@rlab.tn)

Service d'information:

[info@rlab.tn](mailto:info@rlab.tn)